



TUTORIAL

EXPORTAR ARCOS

DENTÁRIOS

DIGITALIZADOS PARA O

FORMATO STL POR MEIO

DO SOFTWARE

ORTHOANALYZER

ORGANIZADORAS
ELOÁ CRISTINA PASSUCCI AMBROSIO
CLEIDE FELÍCIO DE CARVALHO CARRARA
MARIA APARECIDA DE ANDRADE MOREIRA MACHADO
THAIS MARCHINI DE OLIVEIRA

ORGANIZADORAS
ELOÁ CRISTINA PASSUCCI AMBROSIO
CLEIDE FELÍCIO DE CARVALHO CARRARA
MARIA APARECIDA DE ANDRADE MOREIRA MACHADO
THAIS MARCHINI DE OLIVEIRA

**Tutorial: exportar arcos dentários digitalizados para
o formato STL por meio do software OrthoAnalyzer**

Bauru

Faculdade de Odontologia de Bauru
Universidade de São Paulo

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
Universidade de São Paulo

2025

2025

Universidade de São Paulo - Faculdade de Odontologia de Bauru
Universidade de São Paulo - Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra,
desde que citada a fonte e autoria.

Proibido qualquer uso para fins comerciais.

Tutorial : exportar arcos dentários digitalizados para o
formato STL por meio do software OrthoAnalyzer
[recurso eletrônico] / Eloá Cristina Passucci
Ambrosio ... [et al.]. -- Bauru: Faculdade de Odontologia
de Bauru. Universidade de São Paulo ; Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Universidade
de São Paulo, 2025.
13 p. : il. ; 31 cm.

Modo de acesso: <https://repositorio.usp.br/item/003255371>

ISBN 978-65-86349-36-8

1. Arco dental. 2. Imageamento tridimensional. I. T. II.
Ambrosio, Eloá Cristina Passucci. III. Carrara, Cleide Felício de
Carvalho. IV. Machado, Maria Aparecida de Andrade Moreira.
V. Oliveira, Thais Marchini de.

CDD 616.0754

Elaborada por: Maria Helena Souza Ronchesel CRB 8/4049

Universidade de São Paulo
Faculdade de Odontologia de Bauru
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75
Vila Universitária
17012-901 Bauru, SP
<http://www.fob.usp.br>
fob@usp.br

Universidade de São Paulo
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
Rua Sílvio Marchione, 3-20
Vila Universitária
17012-900 Bauru, SP
<https://hrac.usp.br>
hrac@usp.br

ORGANIZADORAS

ELOÁ CRISTINA PASSUCCI AMBROSIO

Graduada em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Araraquara/ Universidade Estadual Paulista (FOAr/UNESP). Mestre e Doutora em Ciências Odontológicas Aplicadas, área de concentração Odontopediatria pela Faculdade de Odontologia de Bauru/ Universidade de São Paulo (FOB/USP). Pós-doutoranda no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais/ Universidade de São Paulo (HRAC/USP).

CLEIDE FELÍCIO DE CARVALHO CARRARA

Graduada em Odontologia pela FOB/USP. Mestre em Ciências Odontológicas Aplicadas, área de concentração Odontopediatria pela FOB/USP. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo HRAC/USP. Odontopediatra no HRAC/USP.

MARIA APARECIDA DE ANDRADE MOREIRA MACHADO

Graduada em Odontologia pela FOB/USP. Mestre e Doutora em Ciências Odontológicas Aplicadas, área de concentração Odontopediatria pela FOB/USP. Professora titular do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva na FOB/USP.

THAIS MARCHINI DE OLIVEIRA

Graduada em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba/ Universidade Estadual Paulista (FOA/UNESP). Mestre e Doutora em Ciências Odontológicas Aplicadas, área de concentração Odontopediatria pela FOB/USP. Professora titular do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva na FOB/USP e do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação – Fissuras Orofaciais e Anomalias relacionadas no HRAC/USP.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
TUTORIAL	6




APRESENTAÇÃO

A análise dos arcos dentários é um procedimento essencial que contribui de maneira significativa para diagnóstico, planejamento e acompanhamento do tratamento odontológico.


Este tutorial apresenta informações sobre como exportar arcos dentários digitalizados por meio do software OrthoAnalyzer. Foi desenvolvido com o objetivo de apoiar as atividades de ensino e pesquisa do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais e da Faculdade de Odontologia de Bauru, ambas vinculadas à Universidade de São Paulo.

TUTORIAL


1. Clique duas vezes no ícone "OrthoAnalyzer – Client".
2. Na janela "Abrir Arquivo – Aviso de Segurança", clique em "Executar".

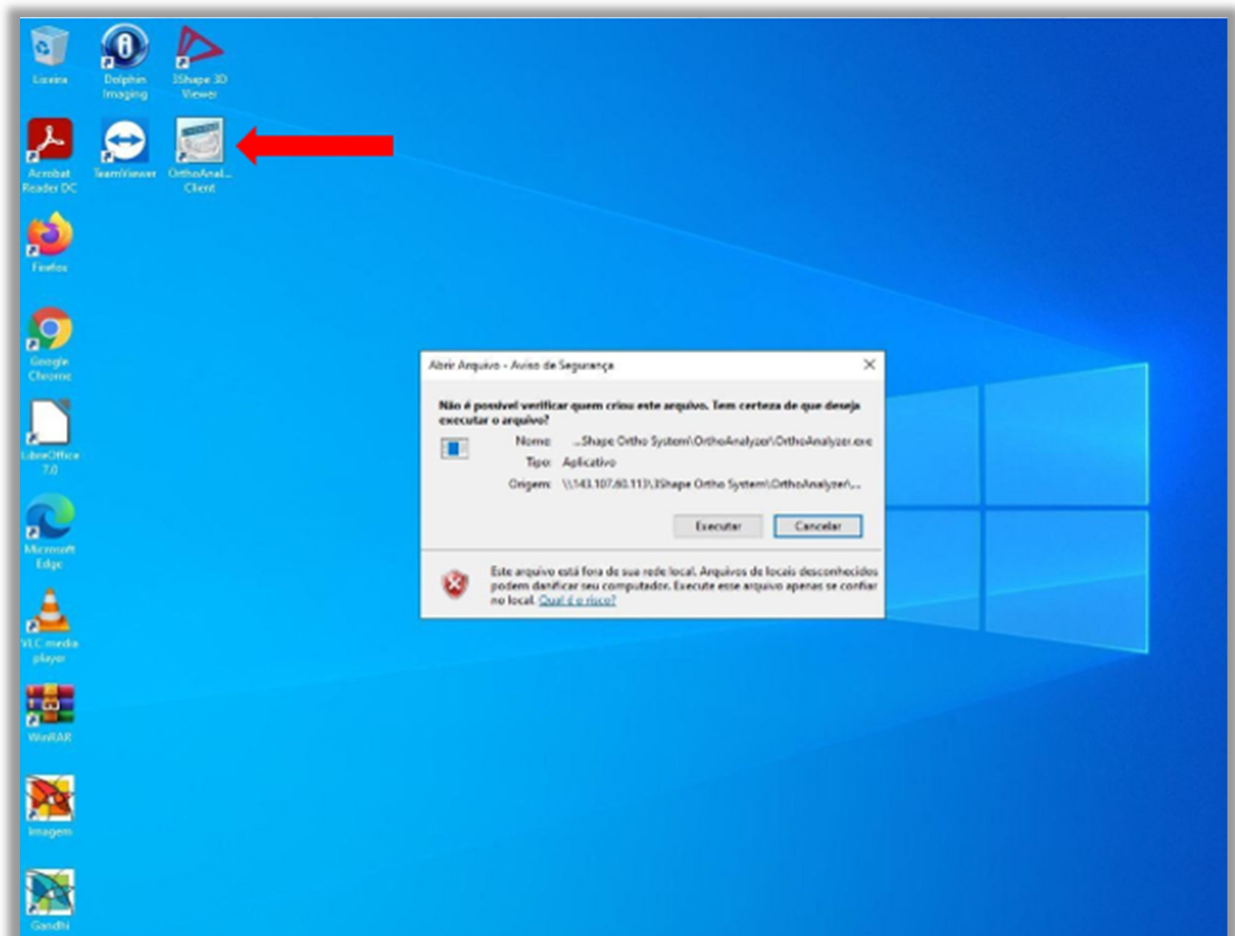


3. Clique no ícone indicado abaixo.

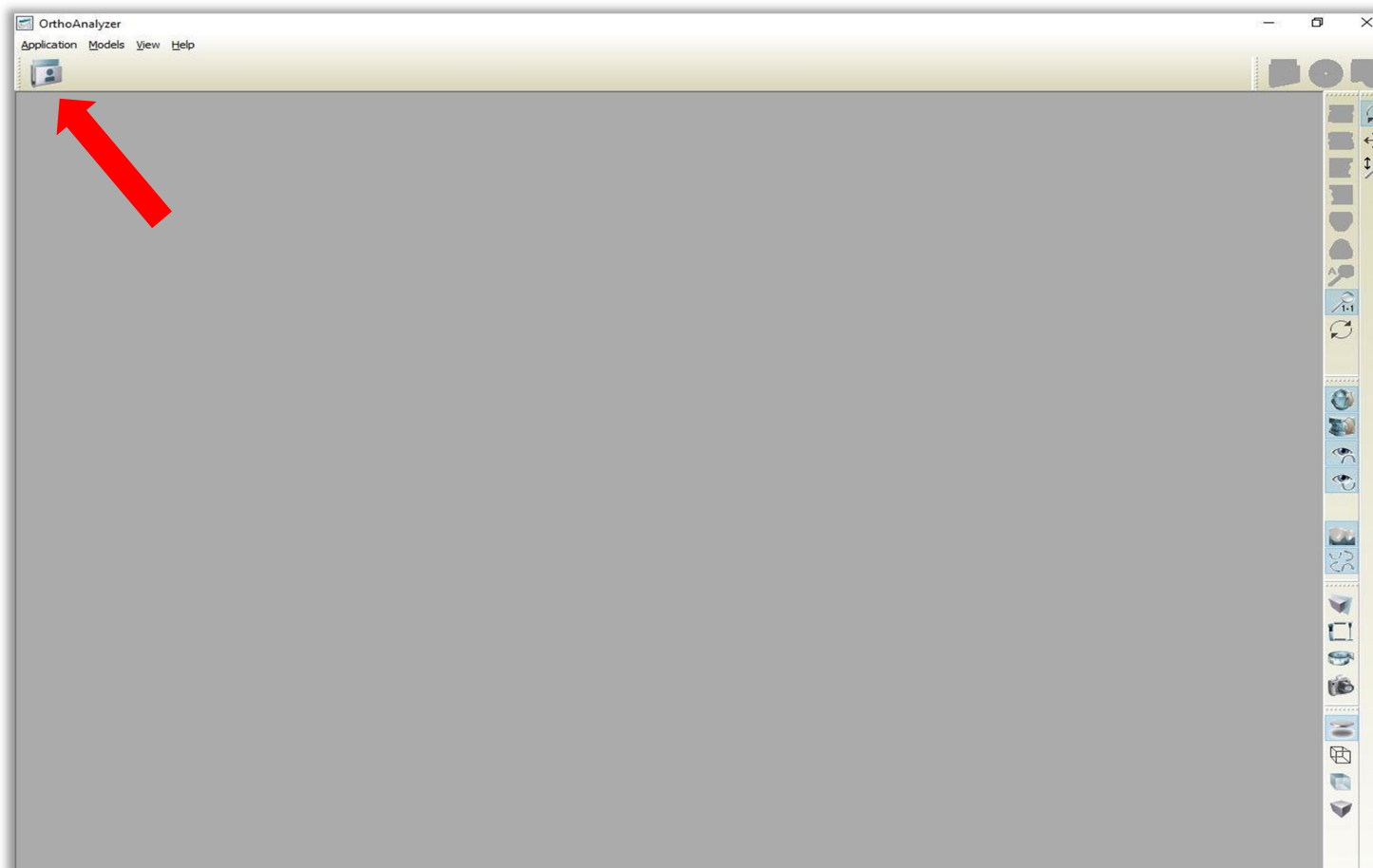

4. Em "Patient search" digite o RG referente a matrícula do indivíduo no HRAC/USP; em seguida clique em "Search".

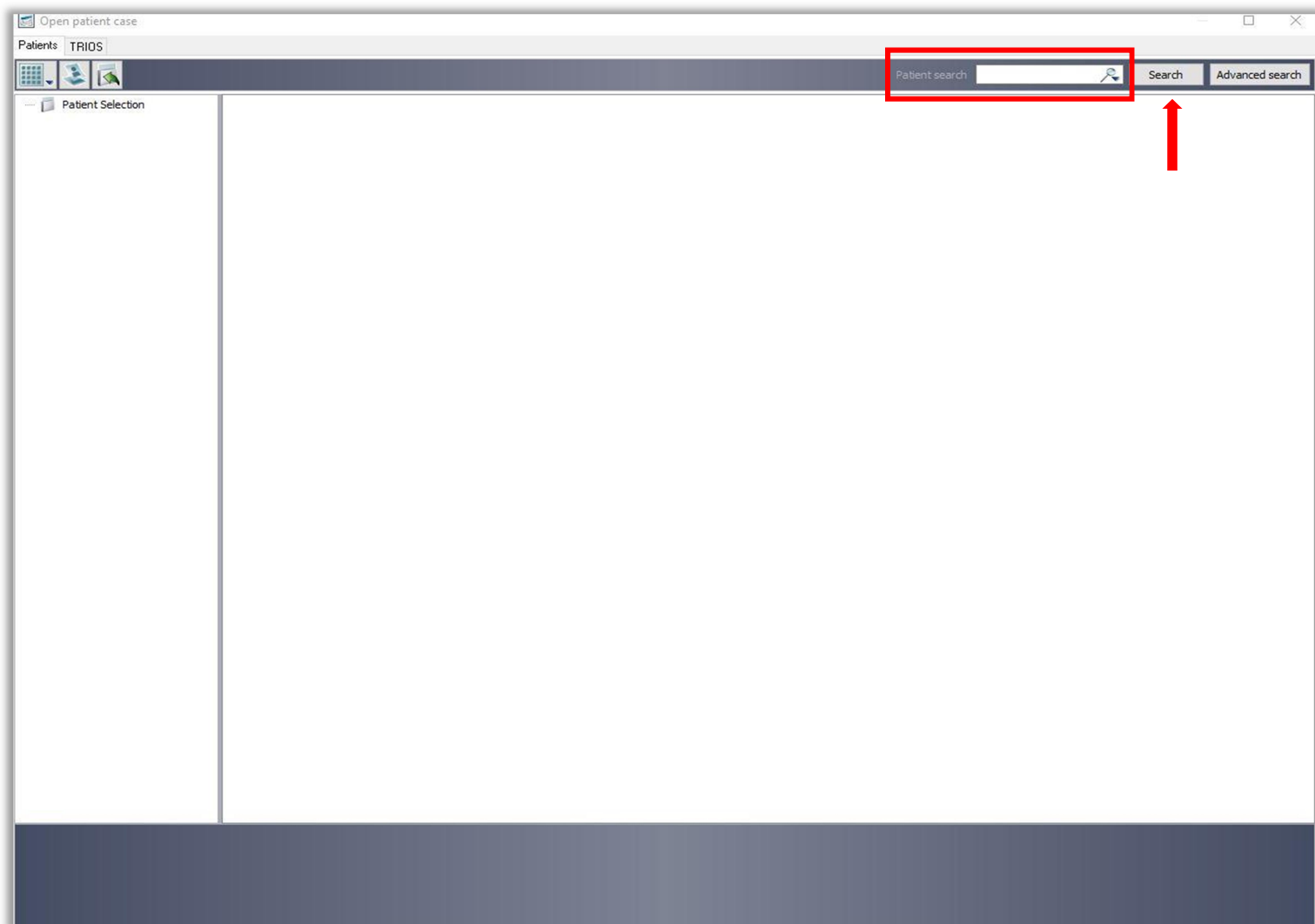


5. Clique duas vezes no nome do paciente, conforme indicação. Em seguida, na coluna "Model set ID", selecione o arco dentário que será exportado.

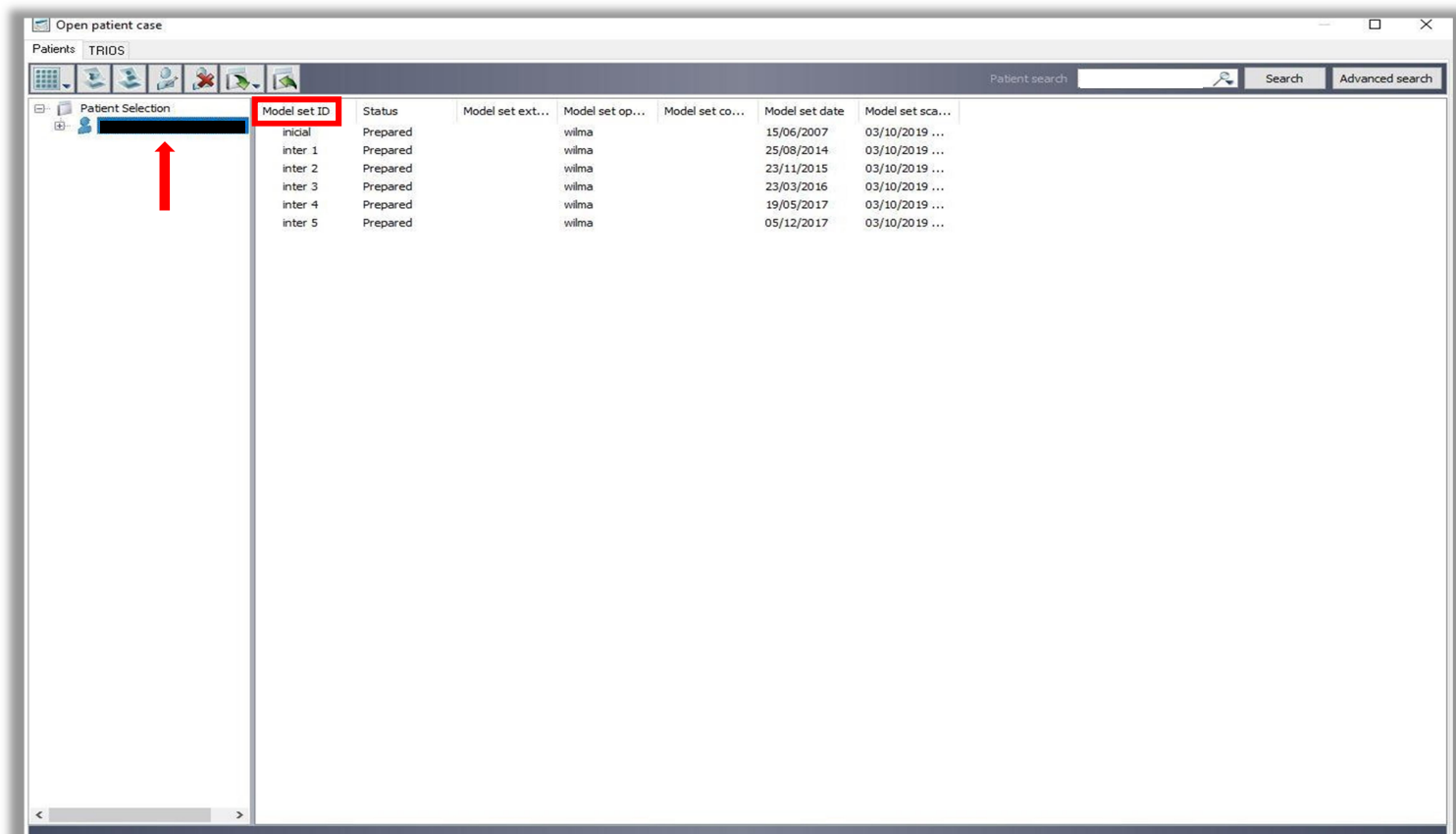

6. Clique em "Models" e em seguida clique em "Export models as..."




7. Na janela "Save models as...", clique em "Browse".
8. Em seguida aparecerá outra janela "Salvar como", crie uma pasta com seu nome. Nesta ficarão armazenados os arcos dentários exportados.

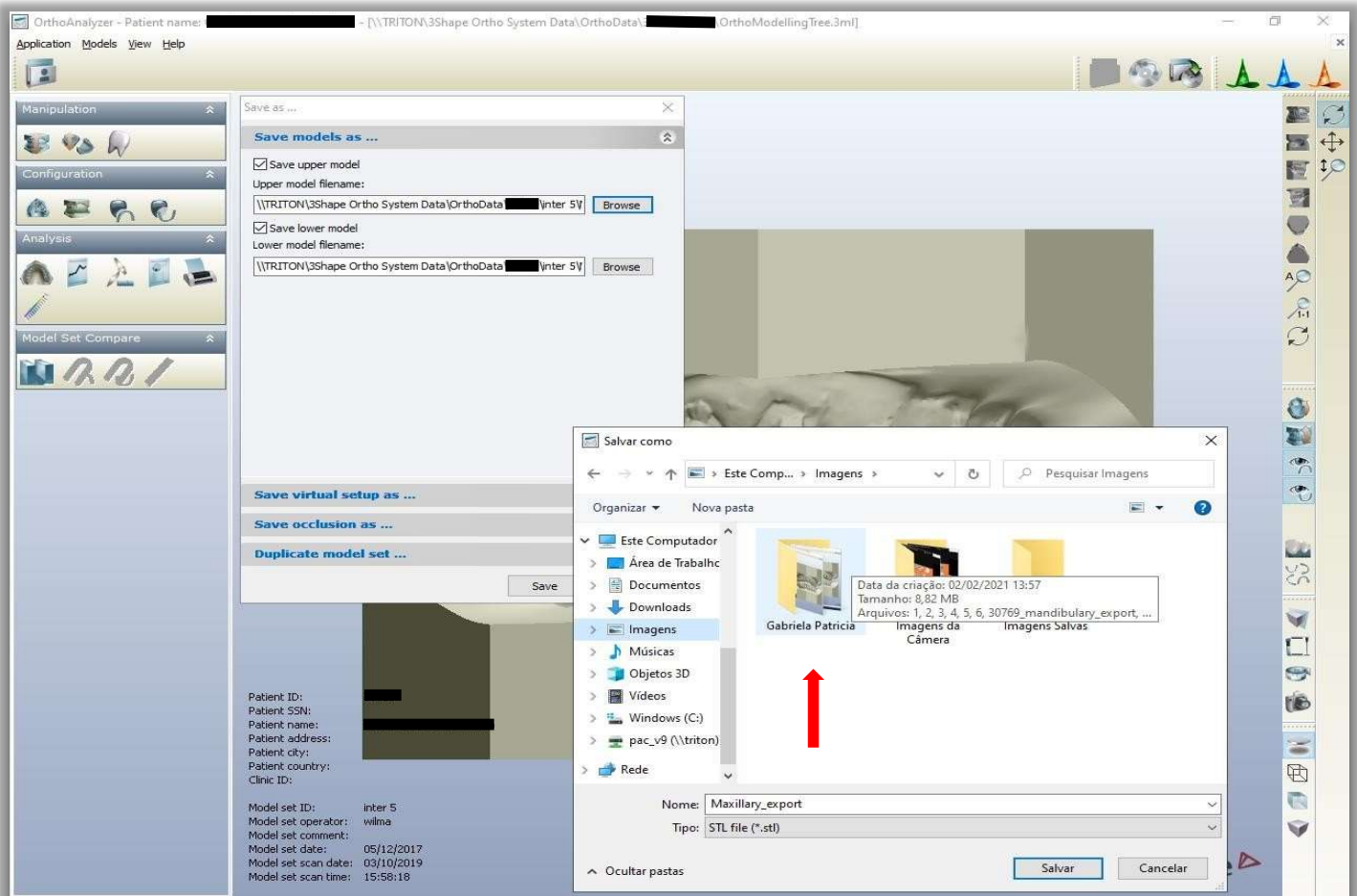



10. Na janela "Save as...", clique em "Save" para finalizar a exportação. Caso o botão "Save" não esteja disponível, clique em "Export".

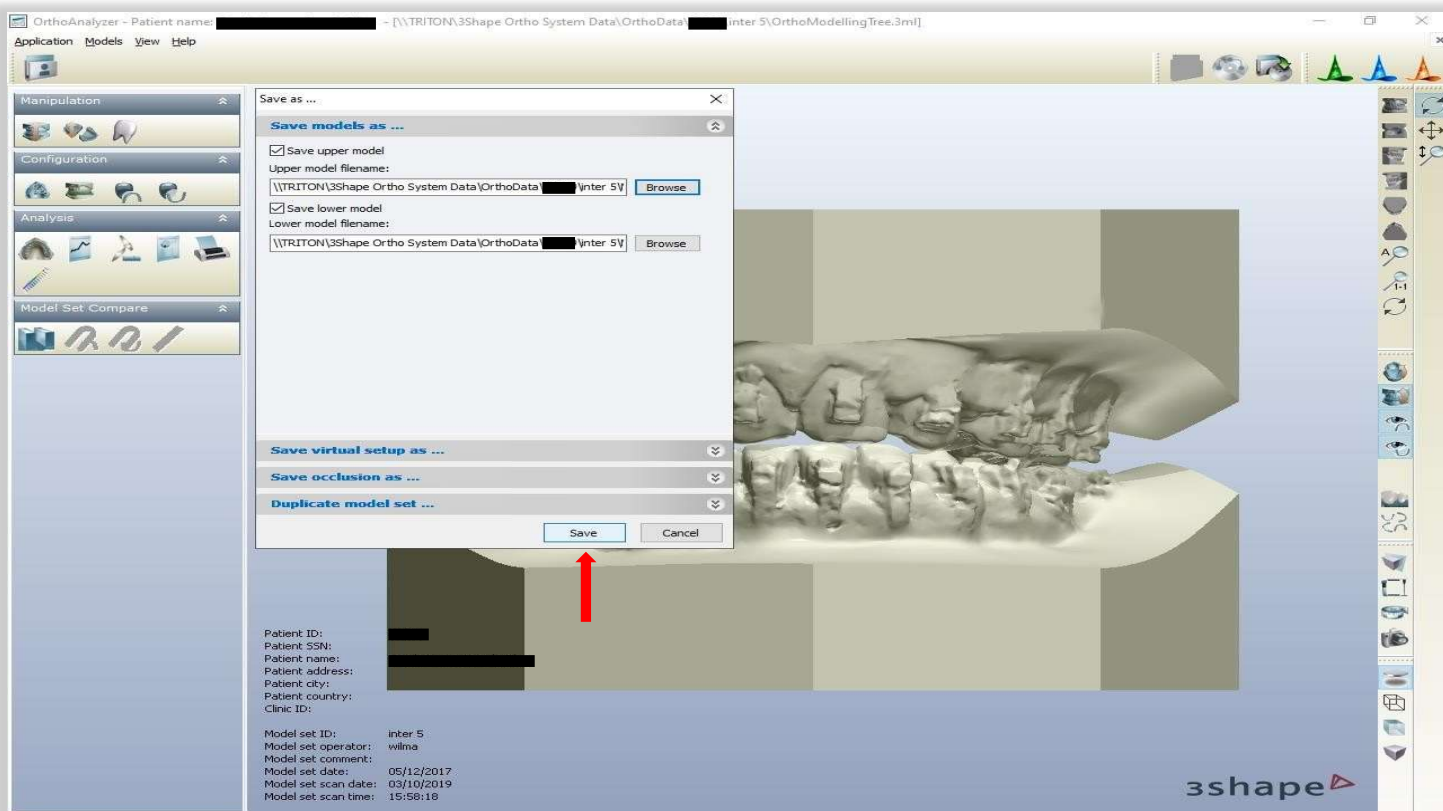

ISBN 978-65-86349-36-8

