



# **Validação do controle de qualidade em radiocirurgia utilizando folhas detectoras OSL baseadas na fluorita brasileira**

**Torquato<sup>a,b</sup> M., Soboll<sup>a</sup> D., Pagotto<sup>a</sup> I., Horst<sup>b</sup> I., Umisedo<sup>c</sup> N., Yoshimura<sup>c</sup> E.,  
Malthez<sup>a</sup> A. L. M. C.**

<sup>a</sup> Universidade Tecnológica Federal do Paraná, CEP: 80230-901, Curitiba – PR, Brasil.

<sup>b</sup> Clinrad, Rua Roberto Barrozo, CEP 80520-070, Curitiba – PR, Brasil

<sup>c</sup> Universidade de São Paulo, CEP 05508-090 Cidade Universitária, São Paulo – SP, Brasil

michele.torquatom@gmail.com

---

## **RESUMO**

Este trabalho descreve o uso de folhas detectoras OSL de  $\text{CaF}_2$  em comparação com câmara de ionização para validação da dose planejada em tratamentos de radiocirurgia utilizando a técnica de arcotomia volumétrica modulada (AVM). O controle de qualidade utilizando câmara de ionização foi realizado com uma câmara de ionização PTW semi-flex posicionada no centro de um fantoma com densidade equivalente à da água, como usualmente realizado na verificação da entrega de dose. Para o controle de qualidade utilizando a folha detectora OSL, foram utilizados 3 detectores OSL de  $\text{CaF}_2$ , fitas de 2 cm de altura e 0,5 cm de comprimento, envoltos separadamente em plástico pretoradiotransparente, posicionados semelhantemente a câmara de ionização no simulador para verificar as doses de 300, 600 e 2100 cGy planejadas. As fitas foram lidas em um leitor linear OSL no modo pulsado. Os valores de dose avaliados ao longo do comprimento das tiras OSL são compatíveis com os valores fornecidos pelo equipamento e medidos com a câmara de ionização. Além disso, durante o controle de qualidade da câmara de ionização, o equipamento forneceu valores máximos compatíveis com os valores medidos ao longo das fitas detectoras de  $\text{CaF}_2$ . Os resultados mostraram a aplicação de folhas detectoras OSL no controle de qualidade para pequenos tamanhos de campo em radiocirurgia.

*Palavras-chave: Controle de qualidade, Radiocirurgia, Detectores OSL em folha.*

---

---

**ABSTRACT**

This paper reports the use of OSL  $\text{CaF}_2$  detector sheets compared to ionization chamber for dose validation planned in radiosurgery treatments using the modulated volumetric arc therapy technique (VMAT). Quality assurance using an ionization chamber was performed with a semi-flex PTW ionization chamber positioned in the center of a phantom with water equivalent density as usually performed in the check of dose delivery. For quality control using OSL detector sheet, 3 detector the  $\text{CaF}_2$  OSL, 2 cm high and 0.5 cm long tapes were used, separately wrapped in radiolucent black plastic and positioned in the position of the ionization chamber in the phantom to verify the doses of 300, 600, and 2100 cGy planned. The detector strips were read on the linear OSL reader in pulsed mode. The dose values evaluated for each of the three schedules along the length of the OSL detector strips are compatible with the values provided by the equipment and measured with the ionization chamber. In addition, during the ionization chamber quality control, the equipment provided maximum values compatible with the values measured along the  $\text{CaF}_2$  OSL tapes. The results showed the application of OSL detector sheets in quality control for small field sizes in radiosurgery.

*Keywords: quality assurance, radiosurgery, OSL detector sheet.*

---

## 1. INTRODUÇÃO

Dentre as melhores práticas disponíveis, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a radioterapia é uma das principais opções no controle do câncer, já que aproximadamente 52% dos pacientes oncológicos devem receber radioterapia pelo menos uma vez ao longo do tratamento. Ainda quando associada a outras modalidades, a radioterapia tem papel fundamental no tratamento, estimando-se que cerca de 40% dos pacientes que estão curados do seu câncer passaram por esse tipo de terapia. Além disso, esta modalidade é eficaz nos tratamentos paliativos e no controle de sintomas em casos avançados ou de recidiva [1].

Entre todas as modalidades terapêuticas na radioterapia, a radiocirurgia ganhou destaque como forma efetiva de tratamento associada com baixa morbidade e mortalidade [2]. Em especial, a tecnologia Arcoterapia Volumétrica Modulada (AVM) fornece cobertura ao volume de tratamento preservando os órgãos de risco, com a vantagem da entrega rápida da dose, permitindo mais conforto e reduzindo o movimento durante a execução do tratamento [3].

Nas diversas áreas que utilizam radiação ionizante, devido à proteção radiológica, se faz necessário o controle de qualidade para se conhecer a dose entregue em cada procedimento. Os controles de qualidade e as medidas de dose podem ser feitas através de diversos modos, utilizando equipamentos como câmara de ionização, filme radiocrômico ou detectores luminescentes [4,5].

Baseada nas recomendações internacionais, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão brasileiro que regulamenta e fiscaliza no Brasil as instituições que utilizam radiação ionizante para fins terapêuticos, não descreve os processos de controle de qualidade, porém estabelece como obrigatório os testes para garantir a segurança nos tratamentos e na precisão para a entrega da dose prescrita [6].

A verificação da dose entregue pelo acelerador linear é feita através do Protocolo TRS 398, o qual foi criado com o objetivo de facilitar a determinação da dose absoluta com exatidão em radioterapia e também permitir o uso de vários dosímetros fornecendo os melhores coeficientes de interação e fatores de correção. A eficiência mecânica nos aceleradores é feita através dos testes apresentados no TECDOC 1151 – Aspectos Físicos da Garantia da Qualidade em Radioterapia, os quais visam uma padronização dos parâmetros básicos dos tratamentos radioterápicos [6-8].

Nos tratamentos que envolvem alta tecnologia como radioterapia de intensidade modulada, radiocirurgia e terapia volumétrica, além dos requisitos mencionados anterior, são necessários outros meios de controle de qualidade para garantir a entrega da dose planejada ao paciente. Vale citar que o controle de qualidade é personalizado ao planejamento de cada paciente. Tais meios são fundamentais na segurança, pois são verificadas todas as etapas do processo desde o planejamento até a entrega de dose levando em consideração todas as particularidades do tratamento [6,9].

Para verificação específica por paciente, um dos métodos empregados é a medida da dose em um ponto de um fantoma com o uso de câmara de ionização juntamente com a irradiação de um filme radiocrômico para obtenção de um plano de distribuição de dose [10]. Neste método, os resultados obtidos com os dois detectores são comparados com o sistema de planejamento para verificar a segurança do processo.

No caso da radiocirurgia, há grande dificuldade em realizar dosimetria em regiões com pequenos campos de irradiação e grande gradiente de dose, pois dosímetros populares utilizados nos centros de radioterapia possuem restrições para fazer esse tipo de medida. As câmaras de ionização e semicondutores, por exemplo, não fornecem a resolução espacial que alguns planejamentos necessitam, enquanto filmes radiocrômicos apresentam “efeito de borda” dificultando medidas em campos pequenos de irradiação [11].

Dentre os sistemas dosimétricos disponíveis, tem-se os baseados na luminescência opticamente estimulada (*Optically Stimulated Luminescence* – OSL). Devido à natureza óptica do processo, alguns detectores OSL, comerciais como o Thermalox 995 (Materion Co) de óxido de berílio e o Luxel (Landauer Inc) de óxido de alumínio, ou desenvolvidos nacionalmente, como as folhas OSL baseadas na fluorita natural brasileira, apresentam como principal vantagem a possibilidade de reavaliação das doses (releitura), avaliação da distribuição e perfil de dose [12-14].

Considerando a necessidade de meios precisos e eficientes para dosimetria em campos pequenos e as vantagens dos detectores OSL, neste trabalho foi comparado o controle de qualidade feito com câmara de ionização durante o planejamento de tratamentos de radiocirurgia (padrão ouro) com o controle de qualidade empregando folhas detectoras OSL de fluoreto de cálcio ( $\text{CaF}_2$ ) baseadas na fluorita nacional brasileira.

## 2. MATERIAIS E MÉTODOS


Para comparar os controles de qualidade utilizando câmara de ionização e as folhas detectoras, foram realizados três planejamentos no sistema o MonacoElekta com fracionamento único (doses de 300 cGy, 600 cGy e 2100 cGy) utilizando a tecnologia AVM e empregando fótons com energia de 6 MV. Este foi feito para um adulto padrão utilizando a tomografia do simulador antropomórfico adulto *Alderson Radiation Therapy Phantom* (ART 210), como mostrado na Figura 1.



**Figura 1:** Planejamento da radiocirurgia (AVM) em simulador antropomórfico.

Fonte: Autor


Para criar o controle de qualidade do tratamento proposto utilizando o MonacoElekta, o planejamento completo realizado no simulador antropomórfico (mesmo arco/ângulo de gantry, mesmos segmentos e as mesmas unidades monitoras e suas respectivas doses de tratamento) foi transferido à tomografia de um fantoma, composto por placas de polimetilmetacrilato com densidade equivalente à água com encaixe para câmara de ionização em região central medindo 30x30 cm<sup>2</sup> totalizando 17 centímetros de altura. A Figura 2 mostra a câmara de ionização PTW semi-flex (modelo TN31010) utilizada para medida de dose no fantoma.

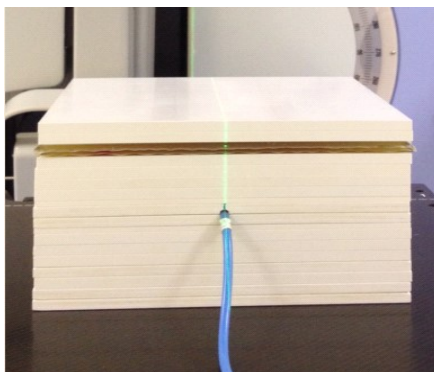

**Figura 2:** Câmera de ionização PTW semi-flex modelo TN31010 e fantoma polimetilmetacrilato 30x30x17 com densidade equivalente à água.

Fonte : Autor

O isocentro de tratamento foi posicionado no fantoma para que o volume sensível da câmera de ionização ficasse na região homogênea de dose (região do volume-alvo de maior dose) diminuindo as incertezas durante as medidas, conforme mostrado na Figura 3.

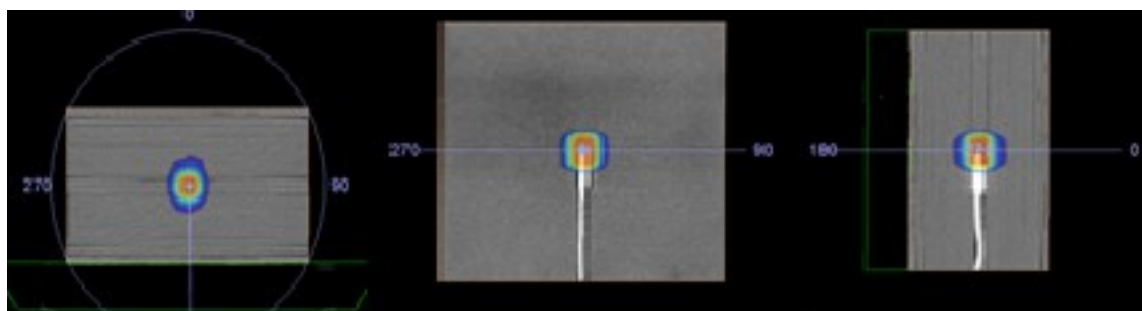

**Figura 3:** Fantoma polimetilmetacrilato 30x30x17 cm<sup>3</sup> com densidade equivalente à água no sistema de planejamento Monaco Eleka.

Fonte: Autor

As irradiações para controle de qualidade foram realizadas utilizando um acelerador linear Elekta Synergy Full com feixe de fótons com energia de 6 MV, empregando a câmera de ionização PTW semi-flex, acoplada a um eletrômetro PTW (Unidos E), posicionada no centro do fantoma (placas 30 x 30 cm<sup>2</sup> com densidade equivalente à água totalizando 17 centímetros de altura), conforme já realizado na rotina da clínica para validação da entrega da dose planejada. A exposição indicada pela câmera de ionização foi convertida em dose e comparada àquela prevista pelo sistema de planejamento.

As folhas detectoras OSL de  $\text{CaF}_2$  foram produzidas a partir da fluorita nacional brasileira utilizando à técnica a frio desenvolvida na Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Curitiba [14].

Para o controle de qualidade empregando as folhas detectoras OSL de  $\text{CaF}_2$ , estas foram calibradas para energia de fótons de 6 MV. Primeiramente, tiras de folhas deectoras OSL, com aproximadamente 2 cm de comprimento, 0,5 cm de largura e poucos milímetros de espessura, embaladas aos pares em plástico preto radiotransparente, foram irradiadas no acelerador linear com fótons de 6 MV utilizando doses de 100 a 1000 cGy.


As leituras foram realizadas em um leitor OSL linear, mostrado na Figura 4, no modo pulsado; desenvolvido e em funcionamento no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Com isso foi avaliado o fator de calibração, utilizado para converter os valores de intensidade OSL (sinal luminoso) em dose (em cGy).



**Figura 4:** *Leitor OSL linear.*

Fonte: Autor.

Para a validação da dose planejada a ser entregue utilizando as folhas OSL de  $\text{CaF}_2$ , 3 fitas detectoras OSL, com as mesmas dimensões das tiras utilizadas na calibração e embaladas separadamente em plástico preto radiotransparente, foram posicionadas na mesma localização da câmara de ionização no fantoma composto por placas de polimetilmetacrilato (Figura 5). Em seguida, para verificar as doses de 300, 600 e 2100 cGy planejadas, foram realizadas as irradiações do mesmo modo que foi feito para verificar as doses com a câmara de ionização PTW. Assim como na calibração, as fitas foram lidas no leitor OSL linear no modo pulsado.

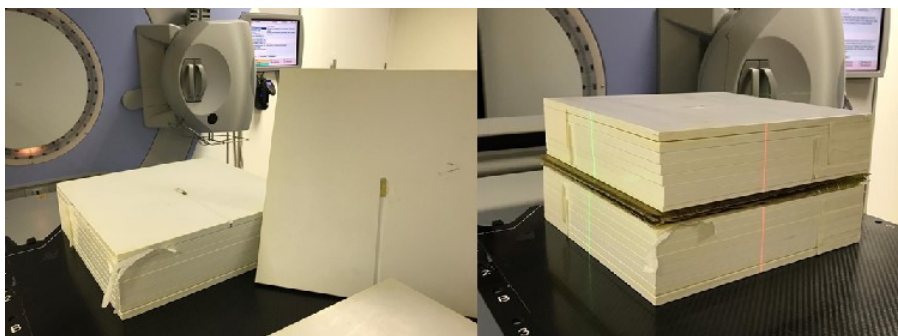

**Figura 5:** Posicionamento folha OSL de  $\text{CaF}_2$  para validação da dose planejada.  
Fonte: Autor

### 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os valores de dose de tratamento e o valor máximo dado no sistema de planejamento, os valores medidos com a câmara de ionização (CI) e os valores de dose avaliados ao longo dos comprimentos das fitas OSL de  $\text{CaF}_2$ .

**Tabela 1:** Doses fornecidas no plamento e medidas com CI e avaliadas com as fitas detectoras OSL de  $\text{CaF}_2$ .

<b>Dose de tratamento/ dose máxima (cGy)</b>		
300/ 430	600/ 750	2100/2300
<b>Dose CI (cGy)</b>		
304	633	2040
<b>Dose fita OSL de <math>\text{CaF}_2</math> (cGy)</b>		
287±23	691±54	2259±177
282±22	688±54	2341±184
282±22	749±59	2235±176
311±24	737±58	1962±154
292±23	796±62	2019±159
307±24	759±60	2314±182
302±24	791±62	2631±182
332±26	798±63	2674±210
359±28	762±60	2549±200
380±30	740±58	2522±198



358±28	750±59	2655±209
285±22	797±63	2613±205

Comparando os valores de dose avaliados para cada um dos três planejamentos ao longo do comprimento das fitas detectoras OSL com os valores de dose fornecidos pelo equipamento e medido com a câmara de ionização (CI), observamos que estes são compatíveis e que, conforme já previsto no planejamento, doses maiores (valores máximos) do que as doses de tratamento foram observadas ao longo do comprimento das tiras. Os valores máximos de dose dados nos planejamentos foram de 430, 750 e 2300 cGy e as doses máximas avaliadas no controle de qualidade com as folhas OSL de  $\text{CaF}_2$  foram de  $(380\pm30)$ ,  $(798\pm63)$  e  $(2674\pm210)$  cGy. Vale ressaltar que para as duas doses mais baixas, os valores do planejamento e avaliados com as folhas estão dentro das incertezas e, para dose mais alta de tratamento, este está ligeiramente mais alto, porém não foram consideradas as incertezas associadas do planejamento.

Vale também destacar que embora as incertezas associadas aos valores estimados com as folhas OSL de  $\text{CaF}_2$  sejam de aproximadamente 8%, estas são intrínsecas ao sistema dosimétrico na avaliação das contagens de fundo do detector e de escuro do leitor OSL empregado.

Observando os valores medidos com câmara de ionização, vemos que estes podem diferir do valor da dose de tratamento, isso porque no planejamento se tem uma distribuição de dose. Então, embora a câmara possa ser posicionada no ponto quente, onde se tem uma maior perspectiva de se medir o valor máximo, como se tem a dose em um volume relativamente grande, comparado ao volume sensível da câmara, as doses medidas com a câmara estão entre o valor de tratamento e o valor máximo. Já com as folhas OSL no controle de qualidade, é possível observar o gradiente de dose na região de tratamento e com uma boa resolução espacial mesmo aplicando campos pequenos, como no caso da radiocirurgia utilizando AVM.

#### 4. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram feitos controles de qualidade para tratamentos de radiocirurgia utilizando a tecnologia AVM, na qual são empregados campos pequenos, utilizando câmara de ionização,

atualmente padrão ouro nesta modalidade e folhas detectoras OSL de  $\text{CaF}_2$ . Os resultados mostram que tanto para doses baixas como para doses mais elevadas, é possível avaliar a distribuição de dose ao longo do volume pequeno irradiado compatível com as distribuições dadas no planejamento a partir da dose de tratamento. Além disso, as folhas apresentaram boa resolução espacial e resultados compatíveis com os valores medidos com a câmara de ionização, validando sua aplicação para campos pequenos e regiões com altos gradientes de dose. Deste modo, concluímos neste estudo, que as folhas detectoras OSL de  $\text{CaF}_2$  podem ser aplicadas no controle de qualidade do planejamento individualizado dos pacientes submetidos a radiocirurgia com tecnologia AVM, com a vantagem de permitir a visualização da distribuição de dose.

## 5. REFERÊNCIAS

- [1] WHO – World Health Organization. **Radiotherapy Risk Profile. Technical Manual**, Geneva 2008.
- [2] MINTZ, AH et al. **A randomized trial to assess the efficacy of surgery in addition to radiotherapy in patients with a single cerebral metastasis.** *Cancer*, v. 78, p. 1470-1476, 1996.
- [3] STUDENSKI, M.T. et al. **Clinical experience transitioning from IMRT to VMAT for head and neck cancer.** *Medical Dosimetry* 38, p. 171-175, EUA, 2013.
- [4] ICRU - International Commission on Radiation Units and Measurements. **Prescribing, recording, and reporting photon beam therapy. ICRU Report 50**, Bethesda: ICRU, 1993.
- [5] PODGORSK, E. B. **Radiation oncology physics: a handbook for teachers and students.** International Atomic Energy Agency. IAEA. Áustria, 2005.
- [6] CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear. **Requisitos de segurança e Proteção Radiológica para Serviços de Radioterapia. CNEN NN 6.10 (atualizada)**, Rio de Janeiro, 2017.

- [7] IAEA – International Atomic Energy Agency. **Absorbed dose determination in external beam radiotherapy: An international code of practice for dosimetry based on standards of absorbed dose to water. Technical Report Series, IAEA TRS-398**, Vienna, 2000.
- [8] INCA – Instituto Nacional do Cancer José de Alencar Gomes da Silva. Ministério da Saúde. **TEC DOC 1151 (tradução) aspectos físicos da garantia da qualidade em radioterapia, IAEA TEC DOC 1151**, Rio de Janeiro, 2000.
- [9] AGAZARYAN, N.; SOLBERG, TD.; DEMARCO, JJ. **Patient specific quality assurance for the delivery of intensity modulated radiotherapy**. J Appl Clin Med Phys, p 40-50, 2003.
- [10] ESTRO - European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. **Guidelines for the verification of IMRT**. Brussels, 2008.
- [11] NIROOMAND et al. Radiochromic film dosimetry. **Recommendations of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 55**, Medical Physics, vol. 25, No. 11, 1998.
- [12] JAHN, A.; SOMMER, M.; HENNIGER, J. **2D – OSL – Dosimetry with beryllium oxide**. Germany, 2010.
- [13] YUKIHARA, E. G. et al. **An optically stimulated luminescence system to measure dose profiles in x-ray computed tomography**, EUA, 2009.
- [14] MALTHERZ, A. L. M. C., et al. **Low-cost flexible OSL detector leaf for 2D radiation measurements**. ISPR14, Cordoba, 2018.